



ACCESORIOS SERIE PLASMA-FREZZER

MODELO APLICABLE	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA
Para modelos 140 de 40x49cm Para modelos 250-400 46x45,5cm Para modelos 700-1500 de 56x65cm	Rejilla acero plastificado	Rejillas de acero plastificado atóxico (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por clips de plástica, regulables en altura y fácilmente extraíbles.	
Para modelos 140 de 10x45x7,5cm Para modelos 250-400 11,8x40x7,5cm Para modelos 700-1500 de 15,4x60x7,5	Cajón de aluminio con divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para modelos 140 de 33x45x7, H5 Para modelos 250-400 39x40x7,5h Para modelos 700-1500 de 49x60x7,5h	Cajón de aluminio sin divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y sin separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para modelos 700-1500 de 53,8x63x14,8h	Cesta de acero inoxidable	Cesta de acero inoxidable fácil de extraer y ajustable en altura	







Para modelos 250-400-700-1500 de 14x42x15H o 14x50x15H	Rack de alambre de acero inoxidable	Máximo 3 racks por cada rejilla	
Para modelo 140 de 65 mm	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelo 250-400 de 100mm Para modelo 1500	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelo 700	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Puerto con tapón	Puerto mm 35 con tapón	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Puerto 15 mm	Puerto de 15 mm	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Sonda PT100	Sonda PT100 con contactos libres para la conexión a sistemas de monitorización externos	



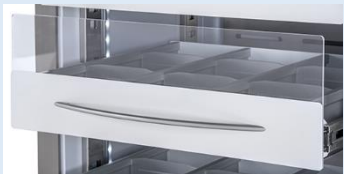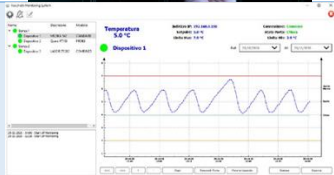

Para modelos 140-250-400-700-1500	Cubeta para la evaporación del condensado	Cubeta para la evaporación del condensado	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Opciones de voltaje -115V/1~/60Hz - 220V/1~/ 60Hz	El frigorífico tiene fusibles de seguridad sea en la fase sea en el neutro como protección contra descargas eléctricas, cortocircuitos y sobre corrientes, de fácil acceso en su parte frontal.	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Estabilizador de Red	Estabilizador de red 8A 1920VA 230V 50-60Hz	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Frontal de plexiglás para cajones	Panel frontal de cajón de plexiglás, altura 83 mm, para reducir el flujo de aire frío	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Gateway IOT	Gateway IOT para conectarse al servicio FIOCCHETTI COLD EYES.	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Sistema de monitoreo FIOCCHETTI LAN SUPERVISOR	Sistema de monitoreo que permite controlar uno o más refrigeradores visualizando tanto lo que está ocurriendo como la historia	
Para modelo 140	Cerradura electrónica	La puerta se abre tocando el icono con llave en la pantalla. Esta función puede ser protegida con contraseña para evitar el acceso a usuarios no autorizado	





Para modelos 140-250-400-700-1500	MODULO GSM	Módulo opcional que permite enviar SMS personalizados de avisos, alarmas, averías a diferentes números de teléfono	
Para modelos 140-250-400-700-1500	MODULO WI-FI	Accesorio para el monitoreo, la conexión y el control del equipo a distancia.	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Modulo convertidor 4-20mA	Este módulo permite conectarse, respetando la polaridad, a un sistema de adquisición externo equipado con entrada 4-20mA. A través de estas salidas será posible convertir el valor de temperatura detectado por la sonda del controlador ECT-F TOUCH o por el DMLP Digital Monitor en una señal de corriente	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Jaula de madera sobre paleta de madera	Jaula de madera sobre paleta de madera	

