



OptiStar® Elite

MR CONTRAST DELIVERY SYSTEM

Una solución interconectada de Guerbet

MR



Una elección inteligente para la resonancia magnética

Eficiencia del flujo de trabajo

Cabezal de potencia de jeringa doble

W Realice inyecciones con jeringa simple o doble utilizadas en los protocolos de resonancia magnética más avanzados.

Habilitar desde la consola

W Minimice los retrasos activando el inyector desde el cabezal de potencia o desde la consola de control.

Programación multifase

W Guarde hasta 40 protocolos de cuatro fases.

Retracción automática

W Retire rápidamente las jeringas del cabezal de potencia sin esperar a que los cilindros se retraigan por completo.

Pantalla táctil a color

W Fácil de usar con diseño de pantalla gráfica intuitivo.

Funcionamiento sin batería

W Elimine el tiempo y los costos asociados con la carga y el reemplazo de la batería.

Compatible con precarga

W Capacidad para extraer jeringas vacías fuera de la sala de examen.

Comodidad y cuidado del paciente

Función de comprobación de permeabilidad®


W Verifique que la adherencia sea adecuada y la permeabilidad vascular junto a la cama del paciente y verifique manualmente si hay un posible episodio de extravasación.

Función Timing Bolus®

W Realice fácilmente una inyección de prueba para confirmar que el protocolo esté configurado correctamente; ayuda a obtener una mejor calidad de imagen al obtener una administración consistente de medio de contraste.

Modo de goteo variable

W Cambie entre el modo de inyección y goteo en cualquier momento para ayudar a garantizar la permeabilidad de la línea intravenosa durante todo el procedimiento.

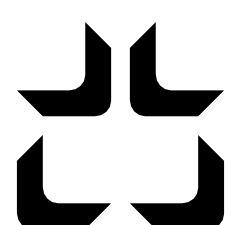

Contrast&Care

INJECTION MANAGEMENT SOLUTION

Haga su pedido junto con su inyector para obtener una solución de inyección completa:

W Capturar y organizar información

W Ahorre tiempo compartiendo información TI de salud

W Facilitar la trazabilidad de los medios de contraste



OptiStar® Elite

MR CONTRAST DELIVERY SYSTEM



Especificaciones técnicas

Caudal	Lado A Jeringas de 60 ml: 0,1–10,0 ml/seg Jeringas de 10, 15, 20 y 30 ml: 0,1–8,0 ml/seg Lado B Jeringas desechables de un solo uso de 60 ml: 0,1–8,0 ml/seg Jeringas precargadas de solución salina de 125 ml*: 0,1–8,0 ml/seg	Jeringas y tubos	Adaptador de tubo en Y con válvulas de retención dobles - 350 psi Tubería en Y con válvula de retención simple - 152 cm (60") - 350 psi Tubería en Y con válvula de retención simple - 229 cm (90") - 300 psi Jeringa MR (2) con válvula de retención simple, tubo en Y y picos de llenado - 60 ml - 229 cm (90") - 300 psi Jeringa MR con aguja de flujo lateral - 60 ml - 300 psi
Volumen	Lado A Jeringas de 10, 15 y 20 ml: de 1 ml a 20 ml Jeringas de 30 y 60 ml: de 1 ml al tamaño de la jeringa instalada Lado B Jeringas de 60 ml: 1 ml al tamaño de la jeringa instalada Jeringas precargadas de solución salina de 125 ml*: 1 ml al tamaño de la jeringa instalada*	Retraso de escaneo	0-60 segundos
Limite de presión	60 mL empty syringes: 150 psi 10, 15, 20, 30 mL prefilled syringes: 200 psi* 125 mL prefilled saline syringes: 100 psi*	Número de fases	6 incluida la función Timing Bolus®
Tamaños de jeringas	60 mL empty syringes 10, 15, 20, 30 mL prefilled syringes* 125 mL prefilled saline syringes*	Number of Programs	40
		Inject History	Últimos 48 protocolos inyectados
		MR Compatibility	Hasta 3 Tesla

*Donde esté disponible

Para ventas y servicio, comuníquese con su representante de ventas enviando mensaje al **55 6709 9766** o llamando **55 1543 0499/ 55 5879 6644, Ext. 16 y 17**

