



OptiVantage®

DUAL-HEAD CT CONTRAST DELIVERY SYSTEM

Una solución interconectada de Guerbet CT

Una solución sencilla para necesidades complejas



Control donde lo necesitas

Autocompletado

W Llena automáticamente jeringas desechables.

Habilitar inclinación

W Completar la secuenciación ayuda a reducir el riesgo de embolia gaseosa.

Capacidades de la interfaz

W Las capacidades de interfaz de relé y CAN clase 4 vienen de serie en todos los modelos OptiVantage®.

Inyección simultánea

W Inyección dual proporción de mezcla del 10 % al 90 % en incrementos del 5%.

Seguridad a través de la eficiencia

Comprobación de permeabilidad

W Asegura la colocación adecuada y la permeabilidad vascular.

Purga automática

W Basta con presionar un botón para eliminar la mayor parte del aire de la(s) jeringa(s).

Función Timing Bolus®

W Realice fácilmente una inyección de prueba para confirmar la sincronización del protocolo, lo que puede mejorar la calidad de la imagen.

Función de inicio automático

W Permite que los arietes se retraigan automáticamente a su posición inicial, lo que permite una mejor eficiencia del flujo de trabajo.

Características opcionales

Configuración de montaje en el techo

W Ahorra valioso espacio en tu lugar de trabajo, mientras mantienes el inyector a tu alcance.


RFID

W Previene una embolia gaseosa accidental causada por el uso de una jeringa vacía y usada.

W Previene la contaminación cruzada accidental de pacientes.

W Ayuda a reducir el riesgo de ciertos errores de medicación.

W Reduce significativamente el tiempo de preparación y etiquetado de jeringas.

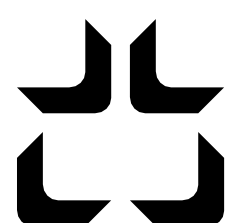

Contrast&Care®

INJECTION MANAGEMENT SOLUTION

Haga su pedido junto con su inyector para obtener una solución de inyección completa:

W Capturar y organizar información

W Ahorre tiempo compartiendo información de TI de salud

W Facilitar la trazabilidad de los medios de contraste



a Guerbet Group Company

OptiVantage®

DUAL-HEAD CT CONTRAST DELIVERY SYSTEM



Especificaciones técnicas

Caudal	0.1-10.0 mL/sec
Límite de presión	50-325 psi pico
Tamaños de jeringas	Jeringas vacías 200 mL, prellenadas 50,75,100,125 mL
Calentador de jeringa	37 °C nominal, minimiza la pérdida de calor del contraste precalentado
Volumen	0,1 mL al volumen en jeringa (200 mL)
Escaneo de retraso	0-600 segundos
Inyección de retraso	0-600 segundos
Retardo de fase	0-600 segundos
Número de fases	6
Memoria de protocolo	40
Resultados de inyección	Últimos 24 protocolos inyectados
Relación de inyección simultánea	10% a 90% en pasos del 5%
Capacidades de la interfaz	Las capacidades de interfaz CAN y relé vienen estándar en todos los modelos OptiVantage®

Jeringas y tubos

P/N 601195	Tubo de extensión en espiral (60”), 400 psi
P/N 601227	Tubo con adaptador Luer macho (48”), 400 psi
P/N 800096S	Jeringa CT (200 ml) con punta
P/N 800099S	Jeringa CT (200 ml) con punta y tubo en espiral (60”), 400 psi
P/N 810551	Juego de transferencia
P/N 810555	Adaptador de tubo en Y con doble válvulas de retención, 350 psi
P/N 844012	Tubería en Y (60”) con válvulas de retención dobles, 400 psi
P/N 844021S	2 Jeringa CT (200 ml) con válvula de retención doble, tubo en Y (60”) y punta, 400 psi
P/N 844022S	2 jeringas CT (200 ml) con tubo en Y (60”) y puntas, 400 psi
P/N 844023S	2 Jeringas CT (200 ml) con válvula de retención doble, tubo en Y (60”) y picos, 400 psi

Para ventas y servicio, comuníquese con su representante de ventas enviando mensaje al **55 6709 9766** o llamando **55 1543 0499/55 5879 6644, Ext. 16 y 17**

