



Illumena® Néó

CONTRAST DELIVERY SYSTEM

Descubra la potencia y el rendimiento de Illumena® Néó: el Inyector Multimodal



Robusta y confiable

A Una reputación basada en la calidad, con la funcionalidad y durabilidad confiables de la familia Illumena

Diseñado para la seguridad

El sistema de advertencia y ayuda para la detección de aire (ADAWS) opcional identifica una jeringa vacía o un bolo de aire.

El cabezal de potencia digital muestra el protocolo programado y el volumen restante.

La pantalla digital del cabezal de potencia se "voltea" a medida que gira para facilitar la visualización

La luz LED altamente visible en el cabezal de potencia indica el estado del Sistema.

Amplia funcionalidad

Capacidad de sincronización con los principales sistemas de imágenes para permitir un control bidireccional.

Cambie entre modos de operación con un solo botón

Barra de control de llenado: operación con un solo dedo

Compatible con jeringas L-F originales precargadas

Interruptores de mano y pedal disponibles

El interruptor de mano permite protocolos de inyección única o múltiple.

La pantalla táctil LCD intuitiva y fácil de usar muestra la información que necesita. Fácil de leer desde cualquier ángulo y con cualquier luz.

Confianza y el rendimiento van de la mano

Las jeringas de alta presión y alta seguridad de L-F están diseñadas y probadas específicamente para inyector LL-F.

- ☞ Arte de cristal para una fácil detección del aire.
- ☞ Se adapta perfectamente a la presión original de la jeringa L-F
- ☞ Validado para su uso con Illumena.

Líneas de alta presión y alta seguridad de L-F diseñadas y probadas específicamente para jeringas L-F.

- ☞ El conector luer lock facilita una conexión segura Múltiples
- ☞ longitudes disponibles
- ☞ Probado, anestésico y validado para funcionar a alta presión.



a Guerbet Group Company

Illumena[®] Néó

CONTRAST DELIVERY SYSTEM


Especificaciones técnicas

Caudal	Modo Angio: 0,1-40,0 ml/s Modo CT: 0,1-10,0 ml/s
Limite de presión	Modo Angio: 75 -1200 psi Modo CT: 75-300 psi
Tamaño de jeringas	Jeringas vacías de 150 y 200 ml. PFS de 50, 75, 100 y 125 ml.
Calentador de jeringas (opcional)	37 °C nominal, minimiza la pérdida de calor del contraste precalentado
Retraso de inyección	0-300 segundos
Retraso de rayos X	0-300 segundos
Retardo de escaneo (modo CT)	0-300 segundos
Aumento de tasas	0-10 segundos
Retardo de fase	0-300 segundos
Número de fases	1, 2 o 3-4
Memoria de protocolo	Modo Angio: 45 protocolos Modo CT: 45 protocolos

Jeringas y tubos

P/N 601280	Tubo con adaptador Luer macho, 76 cm, 1000 psi
P/N 601281	Tubo con adaptador Luer macho, 122 cm, 1000 psi
P/N 900103	Jeringa Angio (150 ml) con punta Linden-Luer y pajilla Handi-Fil
P/N 900105	Jeringa Angio (200 ml) con pajita Handi-Fil

Configuraciones múltiples

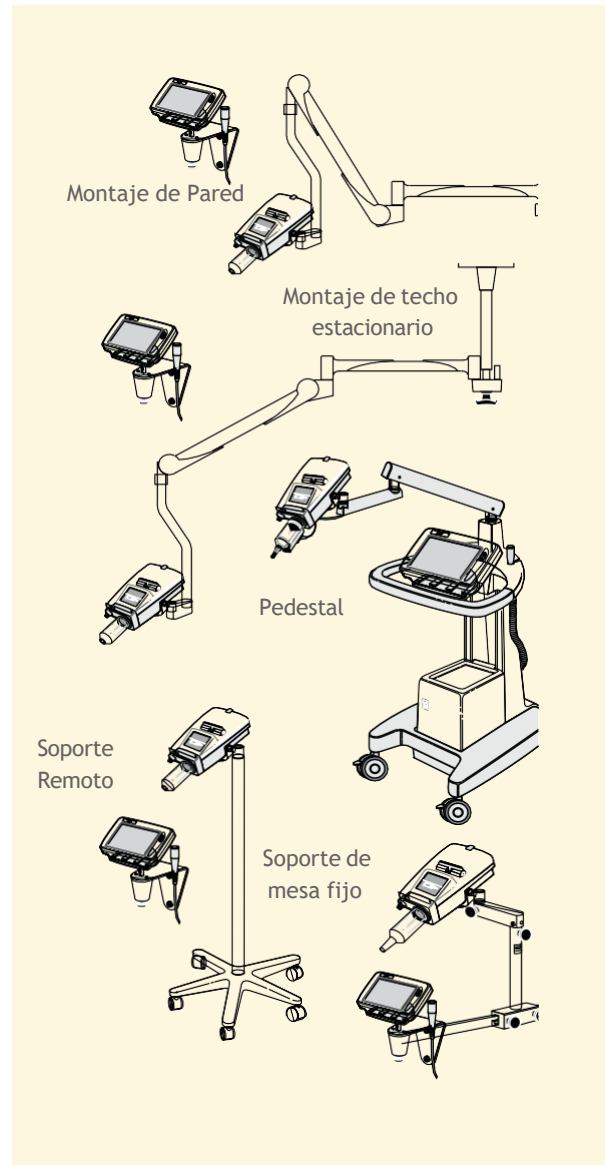

Para ventas y servicio, comuníquese con su representante de ventas enviando mensaje al **55 6709 9766** o llamando **55 1543 0499/55 5879 6644**, Ext. 16 y 17

Guerbet | 